



Art2 Polierer. Einmaliger Glanz
in nur zwei Schritten.



Sirona® ist eine eingetragene Marke der Firma Dentsply Sirona.
PIEZOlux™, MULTIflex™ und SONICflex™ sind Marken der Firma KaVo.
Proxeo®, Synea® und Alegra® sind eingetragene Marken der Firma W&H.

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®, Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®, TissueMaster Concept® und Visio-Soft® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Oktober 2020



Inhalt

4 5	Einleitung
6 7	Compositepolitur
8 9	Keramikpolitur
10	Metallpolitur
11	Aufbereitung von Polierern



Einfach, weil zweifach: das durchdachte Polierer-Sortiment für alle Materialien.

Ein perfektes Polier-Ergebnis zu erzielen, ist fester Bestandteil des Praxis-Alltages. Damit das so schnell, einfach und effektiv wie möglich erreicht wird, haben wir Art2 für Sie erfunden. Ein Polierer-System, das in fast allen Anwendungen mit nur zwei aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten funktioniert.

Jeder einzelne der Art2 Polierer ist jeweils perfekt auf Struktur und Textur der verschiedenen modernen Füllungsmaterialien abgestimmt. Dabei arbeiten Finierer und Polierer immer als eingespieltes 2er-Team, das seinen Job schnell und professionell erledigt.

Damit Sie sich in jedem Polier-Fall sofort und schnell zurechtfinden, haben wir Ihnen einen Leitfaden zusammengestellt: Ein Blick genügt, und Sie wissen sofort, welches Art2-Team zum Einsatz kommen muss. Damit Sie auch immer die richtige Reihenfolge in der Anwendung einhalten, haben wir die diamantkorndurchsetzten Polierer mit Figurnummer gekennzeichnet.

C – coarse (grob), zur Glättung und Konturierung

M – medium (mittel) zur Glanzpolitur

F – fine (fein) für die abschließende Hochglanzpolitur

Tipp: Um das bestmögliche Polierergebnis zu erzielen, empfehlen wir, immer feucht zu arbeiten. Achten Sie auch immer auf die optimale Drehzahl des Polierers, denn sie verbessert das Ergebnis und sorgt dafür, dass das Instrument geschont wird. Alle Art2 Polierer sind wiederaufbereitbar und darum auch mehrfach verwendbar.





Hochglanz hoch 2: Art2 Polierer für Composite.

Die perfekte Kombination aus schnellem Hochglanz bei gleichzeitig hoher Standzeit: die zweistufigen Art2 Spezialisten für Composite schaffen das. Erst die Finitur mit einem Rotringdiamanten oder Hartmetallinstrument. Dann folgt die Politur mit dem Diamantkorn durchsetzten Polierer. Und: fertig.


Vorteile

- perfekter, natürlich aussehender Hochglanz in nur zwei Schritten
- lange Standzeit, hohe Wirtschaftlichkeit
- rosa Vorpolierer zur Formgebung und Glättung
- hellgelber anschmiegsamer Hochglanzpolierer zum Finish

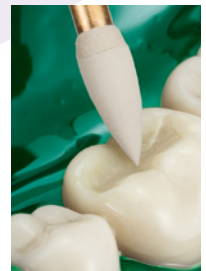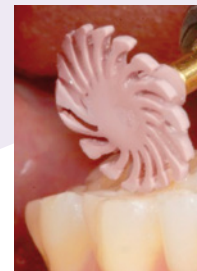

Optimaler Einsatz:


○_{opt.} 6.000 min⁻¹
bitte keinen
Anpressdruck
verwenden

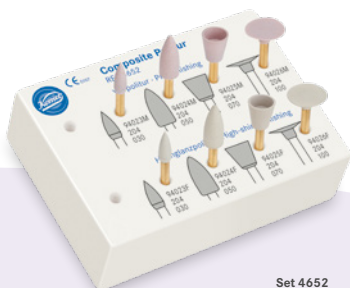

Set 4652
2-stufiges Composite-
Poliersystem




Set 4669
2-stufiges Composite-
Poliersystem

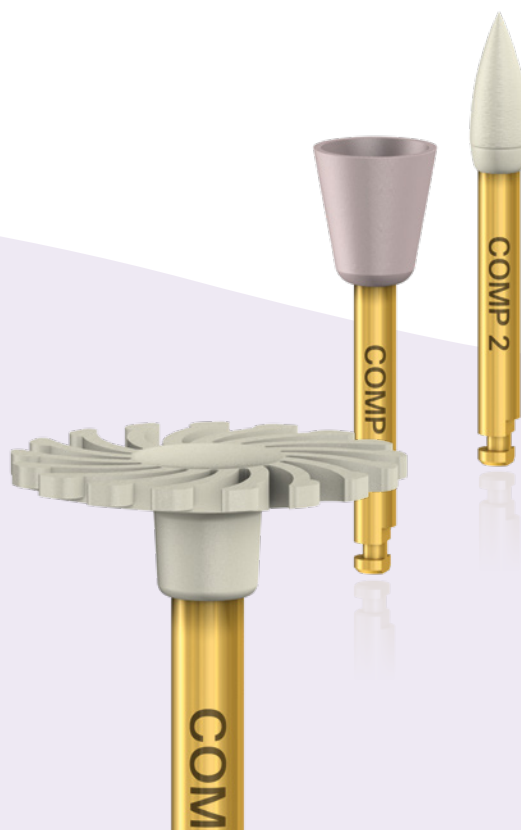



Doppelt und einfach: Q-Finierer + Art2.

Das Nonplusultra für die Composite Finitur:
Die Kombination aus Q-Finierern aus Hartmetall und den 2 stufigen Art2 Polierern. Diese Hartmetallinstrumente schaffen glattere Oberflächen als vergleichbare Diamantinstrumente. So sparen Sie Zeit

und Mühe bei der anschließenden Politur: die Art2 Polierer sorgen für nahezu plane Oberflächen mit hohem, ästhetischem Glanz. Je nach Qualität der Arbeit kann oft sogar auf die Vorpolitur verzichtet werden.

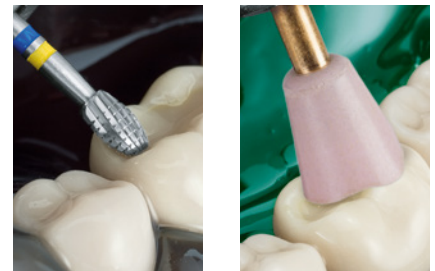

Set 4679
Compositebearbeitung

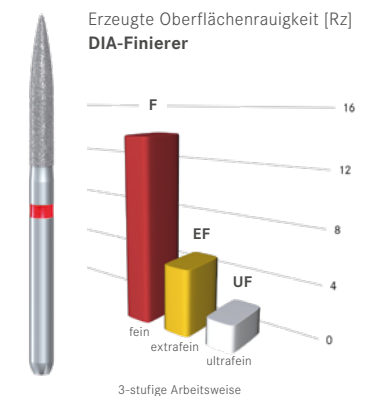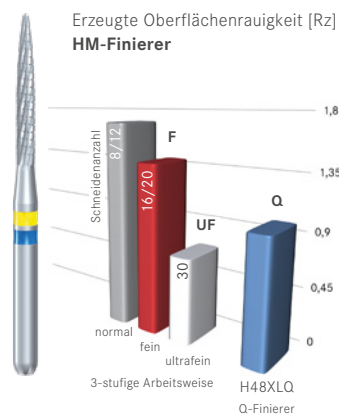

Tipp:

Erfordern die Nachbarzähne profilierte Strukturen, sollten Sie zu einem Diamantinstrument greifen und mit den leicht abrasiven Vorpolierern das Oberflächenbild gestalten und erhalten. Für beide Finiermethoden ist Art2 danach die richtige Poliermethode.

Aus Härte wird Schönheit. Art2 Polierer für Hochleistungskeramiken.

Keramikrestorationen sind die moderne Krönung bei der Sanierung von Zahndefekten. Darum ist die weiße Ästhetik im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Vollkeramiken erfordern jedoch leistungsstarke Polierer. Hier bietet Ihnen Komet mit den Art2 Polierern die Antwort. Mit der abrasiven Vorpolitur erreichen Sie schnell ihr gewünschtes Ergebnis, die anschließende Hochglanzpolitur sorgt für ein perfektes und langanhaltendes Finish.

Vorteile

- lange Standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit
- zeitsparende Vorpolitur nach Korrekturen
- brillanter Hochglanz in nur 2 Polierstufen



Set 4622
Set zur Politur von
Vollkeramiken (z. B. ZrO₂)

Optimaler Einsatz:

○ opt. 6.000 min⁻¹ mit Einsatz von Spraykühlung. Bitte keinen Anpressdruck verwenden.




ZR-Schleifer + Art2 Polierer für keramische Herausforderungen.

Vollkeramiken sind eine der größten Herausforderungen für Zahnarzt und Zahn-techniker.

Sie trotzen der Bearbeitung durch ihre einmalig harten Materialeigenschaften. Doch die Langlebigkeit und das natürliche, ästhetische Aussehen machen sie fast alternativlos.

Komet bietet Ihnen für dieses Material die speziell entwickelten ZR-Schleifer. Sie überzeugen durch hohe Standzeit bei gleichzeitig verbesserter Abtragsleistung gegenüber herkömmlichen Diamantinstrumenten. Anschließend sorgen die Art2 Polierer für überzeugenden Hochglanz.

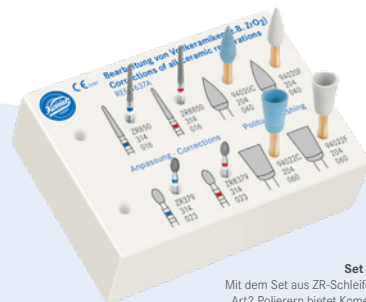

Set 4637A

Mit dem Set aus ZR-Schleifern und Art2 Polierern bietet Komet Ihnen eine kompetente Lösung zur Anpassung und Korrektur ihrer Versorgung.



Go for Gold! 2-stufige Polierer für alle Legierungen.

Traditionelle Metallrestorationen haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, nach wie vor gilt der „Goldstandard“. Hier bieten sich die in Braun und Grün gehaltenen Metallpolierer von Komet an: für die Politur von Amalgam, Edelmetall- und Nicht-Edelmetall-Legierungen.


Der braune Polierer wird innerhalb dieser Indikation für die Vorpolitur und für Feinkorrekturen verwendet, der grüne Polierer wird im nächsten Schritt für die Glanzpolitur eingesetzt. Die beliebtesten Formen sind hierbei die kleine Flamme (9608, 9618) und der Kelch (9606, 9616).

Vorteile

- universelle Nutzung auf allen Metallen
- formstabil
- für den intraoralen Einsatz geeignet

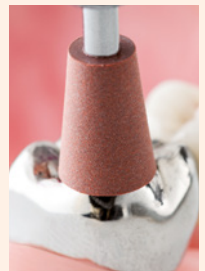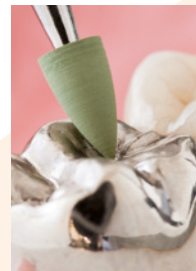

Optimaler Einsatz:
🔄_{opt.} 6.000 min⁻¹

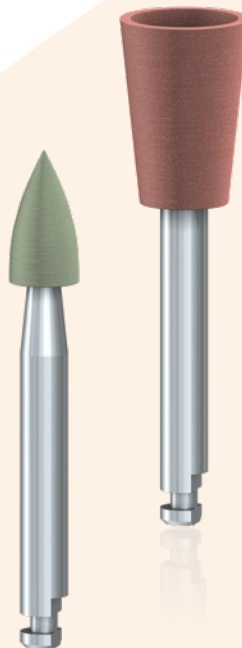

Doppelte Freude: Art2 Polierer sind aufbereitbar.

Richtig aufbereitet bereiten Ihnen die hochwertigen Polierer von Komet aufgrund ihrer hohen Standzeit sehr lange Freude. Aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel können jedoch bei Überschreiten der Einlezeiten dazu führen, dass Ihr Instrumentarium angegriffen wird. Enthält das Reinigungsmittel Alkohole, können sich die Kunststoffstrukturen des Polierers während der Aufbereitung auflösen. Mit DC1 bietet Komet Ihnen eine materialverträgliche und wirtschaftliche alkoholfreie Komplettlösung, mit der die Produkte unkompliziert aufbereitet werden können.

So wird's gemacht:

Mit dem Komet Anwendungsvideo zur korrekten Aufbereitung von Polierern zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Polierer richtlinienkonform aufbereiten.

Immer auf der sicheren Seite und praktisch für die nächste Begehung. Mit den Herstellerinformationen zur Aufbereitung bereiten Sie nach einem validierten, richtlinienkonformen Prozess auf.



Tipp:
Entdecken Sie hier unser Video zum Thema Aufbereitung von Polierern.



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at