


Instrumenty polerskie | Zestaw 4312A

do polerowania kompozytów

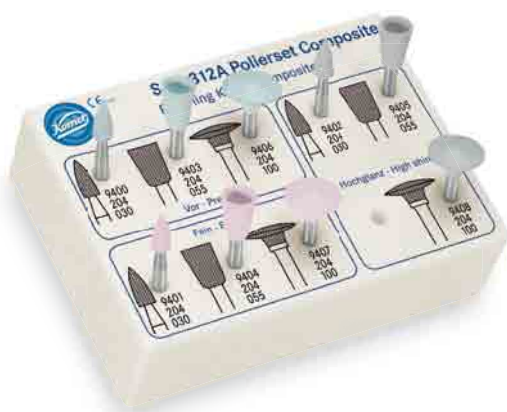


Polerowanie przebiega w trzech etapach:

1. Instrumenty w kolorze jasnoniebieskim przeznaczone są do szybkiego i efektywnego polerowania wstępnego wypełnień kompozytowych.



9400.204.030

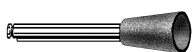

9403.204.055



9406.204.100

3. drobne instrumenty polerskie w kolorze jasnoszarym pozwalają uzyskać wysoki połysk powierzchni.



9402.204.030




9405.204.055




9408.204.100

2. Instrumenty polerskie w kolorze jasnoróżowym nadają powierzchni jedwabisto-matowy połysk.

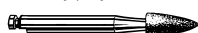

9401.204.030

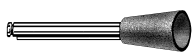


9404.204.055




9407.204.100

Zestaw ten przeznaczony jest do polerowania rekonstrukcji kompozytowych i licówek z tworzywa sztucznego. Trójstopniowe polerowanie diamentowym ziarnem grubym (kolor niebieski), średnim (kolor różowy) i ziarnem drobnym (kolor szary) stwarza lśniącą powierzchnię kompozytu.


Wskazówki dot. stosowania:

- Optymalna liczba obrotów
 $\text{opt. } 5.000 - 6.000 \text{ min}^{-1}$
- Należy zastosować odpowiednie chłodzenie (co najmniej 50 ml/min.)
- Podczas pracy należy wykonywać niewielkie okrężne ruchy bez wywierania nadmiernego nacisku.
- Stosować bez dodatkowej pasty polerskiej
- Instrumenty polerskie należy czyścić i dezynfekować przy użyciu odpowiednich, bezalkoholowych środków, np. Komet DC1 (obróbka ręczna) lub DCTherm (obróbka mechaniczna)
- Sterylizować wyłącznie w autoklawie

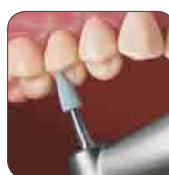

Instrumenty polerskie | Zestaw 43 13B


do polerowania ceramiki

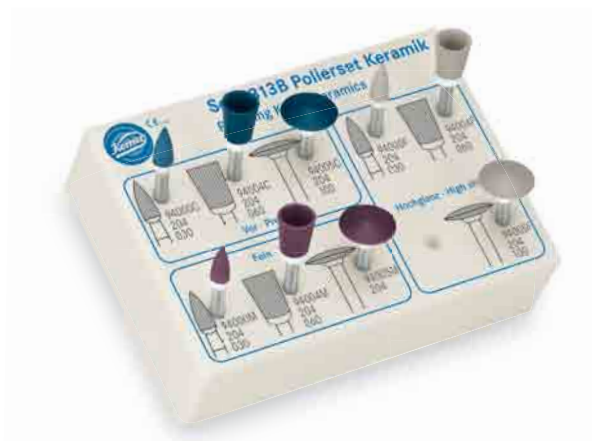

Zestaw opracowany specjalnie do polerowania uzupełnień ceramicznych. Instrumenty przeznaczone do polerowania wstępnego, na połysk i wysoki połysk zawierają drobiny diamentu, dzięki którym po dokonaniu korekt uzupełnienia nie ma potrzeby ponownego napalania glazury.

Polerowanie przebiega w trzech etapach:


1. Instrumenty polerskie w kolorze ciemnoniebieskim przeznaczone są do szybkiego i efektywnego polerowania wstępnego.

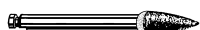

94000C.204.030



94004C.204.060

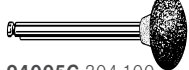

94005C.204.100


2. Instrumenty polerskie w kolorze ciemnoróżowym nadają powierzchni jedwabisto-matowy połysk.



94000M.204.030




94004M.204.055

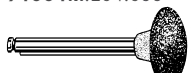

94005M.204.100


3. Szare, niezwykle trwałe i wydajne instrumenty pozwalają uzyskać wysoki połysk powierzchni bez konieczności dodatkowego napalania glazury.

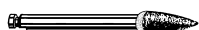

94000F.204.030




94004F.204.060

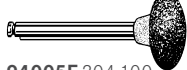

94005F.204.100



Wskazówki dot. stosowania:

- Optymalna liczba obrotów
 opt. 5.000 – 6.000 min⁻¹
- Należy zastosować odpowiednie chłodzenie (co najmniej 50 ml/min.)
- Podczas pracy należy wykonywać niewielkie okrężne ruchy bez wywierania nadmiernego nacisku.
- Stosować bez dodatkowej pasty polerskiej
- Instrumenty polerskie należy czyścić i dezynfekować przy użyciu odpowiednich, bezalkoholowych środków, np. Komet DC1 (obróbka ręczna) lub DCTherm (obróbka mechaniczna)
- Sterylizować wyłącznie w autoklawie