



Polierer | ZrO_2



Polierer für alle High-Tech-Keramiken.


Neue Materialien und Fertigungstechniken erfordern stetig neue Instrumente, um diese zu bearbeiten. Ein komplettes Sortiment für die effektive Politur von sämtlichen Keramiken liefert dieses Poliersystem in nur zwei Schritten. Diese Polierer eignen sich hervorragend für Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Presskeramik. Ihre geschmeidige Textur schont dabei die anatomische Struktur der Restauration.

Vorteile:

- natürlich aussehender Hochglanz in nur zwei Polierstufen
- lange Standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit
- geringe Polierstaubentwicklung
- goldener Schaft und farbliche Abhebung zur einfachen Identifikation
blau = Vorpolitur
hell-grau = Hochglanzpolitur

Anwendung:

1. Effektive Politur mit der Linse 94011C.104.260 und ...
2. ... 94011F.104.260.
3. Vorpolitur mit dem Rad 94013C.104.170.
4. Politur der Okklusalfäche mit der Flamme 94018C.104.055 oder mit dem Pinpolierer 94027C.900.030.
5. Abschließende Hochglanzpolitur mit 94013F.104.170.
6. Kleine Randkorrekturen und Hochglanz-Finish mit dem 94012F.104.110.

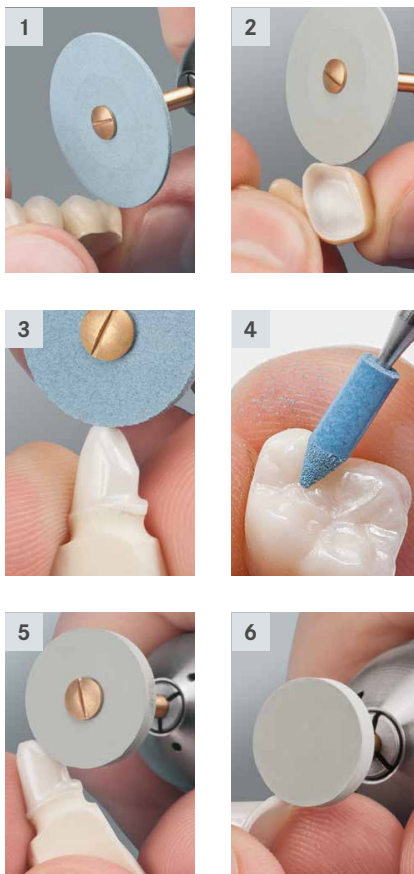

Anwendungshinweise:

- Hervorragende Arbeitsergebnisse bei einer Drehzahl von $\varnothing_{\text{opt.}} 6.000 \text{ min}^{-1}$
- Maximale Drehzahl von $\varnothing_{\text{max.}} 10.000 \text{ min}^{-1}$
- Für beste Arbeitsergebnisse beide Polierstufen nutzen.

Vorpolitur:



Hochglanzpolitur:

