


# Instrumenty polerskie | Zestaw 4313B

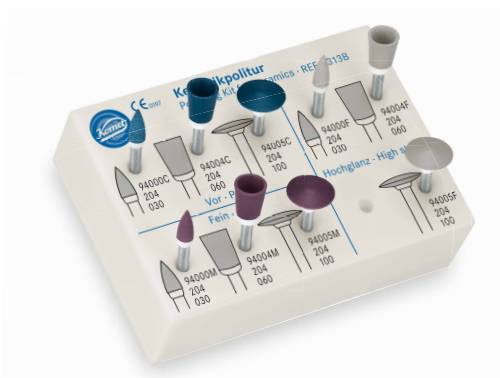

## do polerowania ceramiki.

Zestaw opracowany specjalnie do polerowania uzupełnień ceramicznych. Instrumenty przeznaczone do polerowania wstępnego, na połysk i wysoki połysk zawierają drobiny diamentu, dzięki którym po dokonaniu korekt uzupełnienia nie ma potrzeby ponownego napalania glazury.

### Wskazówki dot. stosowania:

- Optymalna liczba obrotów  
 $\text{rot.} \approx 5.000 - 6.000 \text{ min}^{-1}$
- Należy zastosować odpowiednie chłodzenie (co najmniej 50 ml/min.)
- Podczas pracy należy wykonywać niewielkie okrężne ruchy bez wywierania nadmiernego nacisku.
- Stosować bez dodatkowej pasty polerskiej
- Instrumenty polerskie należy czyścić i dezynfekować przy użyciu odpowiednich, bezalkoholowych środków, np. Komet® DC1® (obróbka ręczna) lub DCTherm® (obróbka mechaniczna)
- Sterylizować wyłącznie w autoklawie

### Polerowanie przebiega w trzech etapach:

1. Instrumenty polerskie w kolorze ciemnoniebieskim przeznaczone są do szybkiego i efektywnego polerowania wstępnego.



**94000C.204.030**



**94004C.204.060**



**94005C.204.100**


2. Instrumenty polerskie w kolorze ciemnoróżowym nadają powierzchni jedwabisto-matowy połysk.



**94000M.204.030**



**94004M.204.055**

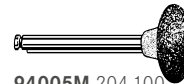

**94005M.204.100**

3. Szare, niezwykle trwałe i wydajne instrumenty pozwalają uzyskać wysoki połysk powierzchni bez konieczności dodatkowego napalania glazury.



**94000F.204.030**



**94004F.204.060**



**94005F.204.100**

