




抛光器械 | Set 4312A

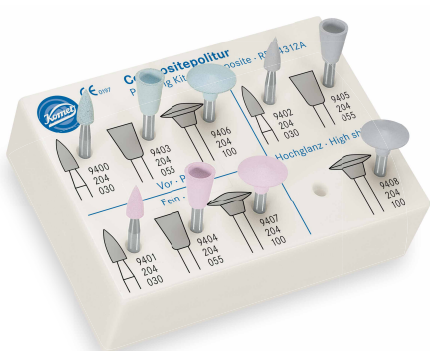

用于抛光复合树脂材料。

这一套装设计专用于抛光复合树脂材料和树脂饰面材料。采用粗（蓝色）、中（粉色）、（灰色）的三步式抛光系统保证了每次所形成的复合材料具有无与伦比的高光完美表面。

建议使用方法：

- 建议转速：
 $\omega_{opt.}$ 5.000 - 6.000 rpm。
- 使用充足冷却剂：冷却剂量须至少为（至少 50 ml/min）。
- 采用低接触压力并采用圆周式运动。
- 无需使用抛光膏。
- 采用适用于抛光器械的无酒精清洁剂和消毒剂，例如，Komet® DCI®（用于手工再处理）或 DCTherm®（用于机械再处理）。
- 仅适用于在高压灭菌器中进行消毒灭菌。

抛光采用三个步骤实施：

1. 浅蓝色抛光器械可对复合填充材料进行快速高效地预抛光。



9400.204.030



9403.204.055



9406.204.100

2. 浅粉色抛光器械用于获得平滑精细表面。



9401.204.030



9404.204.055



9407.204.100

3. 精细的浅灰色抛光器械可获取高亮度表面效果。



9402.204.030



9405.204.055



9408.204.100

