




# 抛光器械 | Set 4313B

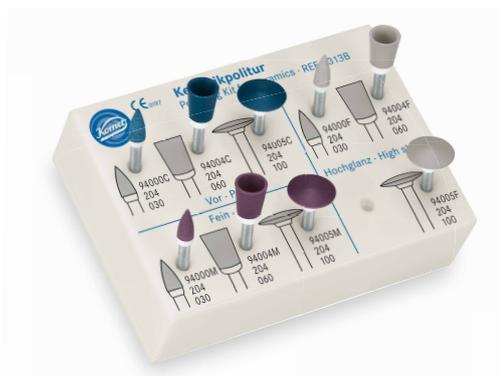

## 用于抛光复合树脂材料。

这一套装是专用于对陶瓷修复体进行抛光。这些含金刚砂的抛光器械，用于预抛光、抛光与高亮度抛光，无需再次进行烤瓷处理。

### 建议使用方法：

- 建议转速：  
 $\omega_{opt.}$  5.000 - 6.000 rpm.
- 使用充足冷却剂：冷却剂量须至少为 (至少 50 ml/min)。
- 低接触压力并采用圆周式运动工作。
- 无需使用抛光膏。
- 采用适用于抛光器械的无酒精清洁剂和消毒剂，例如，Komet® DCI® (用于手工再处理)或DCTherm® (用于机械再处理)。
- 仅适用于在高压灭菌器中进行消毒灭菌。

### 抛光采用三个步骤实施：


1. 深蓝色抛光器械可对陶瓷进行高效快速预抛光。



94000C.204.030



94004C.204.060

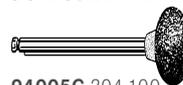

94005C.204.100

2. 深粉色抛光器械可获得光亮表面。



94000M.204.030



94004M.204.055



94005M.204.100

3. 高性能耐磨的灰色抛光器械可在最后一步操作时获得高亮度表面效果，而无需再对烤瓷进行处理。



94000F.204.030



94004F.204.060



94005F.204.100

