



Ich bin die Brücke  
zur maschinellen Aufbereitung.  
Ich bin **PathGlider**.

---





# Ein Vorteil gleitet zum anderen.

---

Die Präparation eines Gleitpfades ist für eine erfolgreiche Wurzelkanalaufbereitung unverzichtbar. So kann die Anatomie des Wurzelkanals gut eingeschätzt werden und es wird gewährleistet, dass die nachfolgenden Feilen für die Wurzelkanalaufbereitung sicher und effektiv arbeiten. Im Vergleich zur rein manuellen Erstellung des Gleitpfades mit Handfeilen bietet Ihnen unser PathGlider enorme Vorteile.



## Reduziertes Risiko von Kanalverlagerung

Dank hochflexiblem NiTi und nicht schneidender Instrumentenspitze folgt der PathGlider dem Kanalverlauf optimal und reduziert so das Risiko von Kanalverlagerungen, Stufenbildung, etc.



## Sanfte Vorbereitung mit Übergangstaper

Aufgrund des Tapers .03 erweist sich der Feilenwechsel vom PathGlider zum maschinellen Feilensystem (z. B. F360 – Taper .04) als besonders schonend und einfach.




## Zeitersparnis

Im Vergleich zur rein manuellen Gleitpfad-erstellung spart der Anwender mit dem PathGlider wertvolle Zeit.



## Einfaches Handling

Der PathGlider ist mit jedem Feilensystem kombinierbar und sorgt dank seines einzigartigen Drachenquerschnitts für glatte Kanalwände und eine gute Kontrolle der Feile im Kanal.

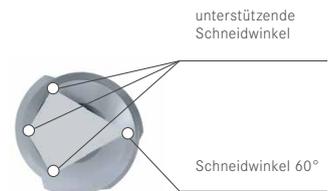

Drachenquerschnitt

[ 01 ] **Sondierung**

Primäre Sondierung per Handfeile und Bestimmung der Arbeitslänge, z. B. mit der K-Feile in Größe 010.

[ 02 ] **Gleitfaderstellung**

Maschinelle Präparation des Gleitpfades mit dem PathGlider in Größe 015. Ergänzend steht der PathGlider auch in Größe 020 zur Verfügung und ist in den drei Längen 21, 25 und 31 mm erhältlich.

[ 03 ] **Aufbereitung**

des Wurzelkanalsystems, z. B. mit F360 oder F6 SkyTaper.



 **PG03L21/L25/L31.204.015**  
PathGlider

 **PG03L21/L25/L31.204.020**  
PathGlider

 <sub>opt.</sub> 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 0,5 Ncm

STERILE | R



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® und TissueMaster Concept® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Juni 2016

