



La era moderna en el retratamiento del conducto radicular. **Endo ReStart.**



Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® y TissueMaster Concept® son marcas registradas de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Los productos y las denominaciones comerciales que figuran en estas páginas se encuentran protegidos en parte por patente o por derecho de autor o de marcas. La ausencia de una nota específica o la no figuración del signo © no significa que no exista tal protección jurídica.

Esta obra está protegida por derecho de autor. Todos los derechos de divulgación, incluyendo reproducción total o parcial de fotos o textos, reimpresiones o extractos, almacenamiento o recuperación o difusión mediante cualquier sistema, están reservados y requieren de nuestro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Hecho en agosto de 2017



Endo ReStart anuncia una nueva era en el retratamiento del conducto radicular.

- Nuevo sistema de limas de NiTi para el retratamiento del conducto radicular
- Geometría especial del filo con torsión dinámica («dynamic twist»), adaptada a la eliminación óptima de las obturaciones radiculares
- Ofensiva controlada gracias a la punta de seguridad «safe activity» del instrumento
- Conicidad de .05 para un equilibrio perfecto entre estabilidad y flexibilidad

Endo ReStart: Retratamiento con torsión dinámica.



Encuentra el equilibrio.

Cada retratamiento constituye la necesidad de corregir un tratamiento endodóntico realizado. Con una conicidad de .05 la lima Endo ReStart ofrece un equilibrio perfecto entre alta estabilidad y flexibilidad, asegurando la adaptación a diferentes morfologías radiculares.



Nada complicado.

El sistema de limas Endo ReStart existe en dos tamaños de 21 y 25 mm. Así mismo el sistema incluye un «opener» con alta eficacia de corte denominado Endo ReStart Opener, que permite una penetración inicial en materiales de obturación muy duros. De modo que la mayor parte de la vieja obturación radicular puede retirarse con tan sólo de 1 a 2 instrumentos.





Punta eficaz.

La lima Endo ReStart cónica está dotada de una punta no cortante pero efectiva («safe activity»). Gracias a esta optimización, la lima puede introducirse fácilmente en el material de obturación radicular. Mientras el instrumento de abertura Endo ReStart Opener inicialmente utilizado es capaz de penetrar en el material de obturación sin dificultad, las limas Endo ReStart trabajan de forma controlada y efectiva dentro del conducto. Fiel al lema: ofensiva controlada.



Mayor dinámica.

Dotada de una geometría del filo especialmente adaptada, la eficacia de la lima Endo ReStart al raspar y retirar los detritos del conducto es de una calidad incomparable. Gracias a un mayor número de espiras en la punta del instrumento, la lima es capaz de enroscarse de manera efectiva en la obturación radicular. La distancia entre las espiras aumenta a lo largo de la parte activa para facilitar una óptima eliminación pero controlada del material de obturación. Esto es lo que denominamos «dynamic control».

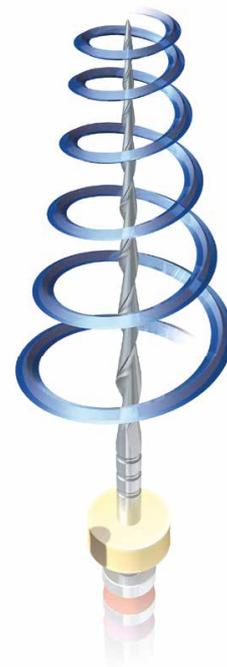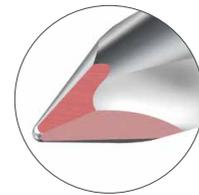

Paso a paso.



[01] Eliminación de la obturación radicular en el tercio coronal con Endo ReStart Opener.

[02] Retirada del resto de la obturación con la lima Endo ReStart.

[03] Preparación final del sistema radicular.

Nuestro consejo: usar nuestras limas F6 SkyTaper para la preparación del conducto.



 300 rpm
 Torque: 1,8 Ncm




Endo ReStart: La forma más rápida y segura para el retratamiento del conducto.

Componentes del sistema Endo ReStart:

 **RE10L15.204.030** 030/10
Opener Endo ReStart
Longitud: 15 mm

STERILE R

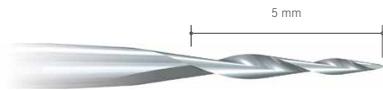

 **RE05L21.204.025** 025/05
Lima Endo ReStart
Longitud: 21 mm

STERILE R



 **RE05L25.204.025** 025/05
Lima Endo ReStart
Longitud: 25 mm

STERILE R



Set de introducción 4680

2x Opener Endo ReStart
4x Limas Endo ReStart
Longitud: 25 mm



Dr. Giuseppe Squeo

Especialista en endodoncia e inspirador
de las limas Endo ReStart, Italia

«En mi consultorio la mayor parte de mi trabajo consiste en realizar tratamientos endodónticos y de éstos, diría que casi la mitad están dedicados al retratamiento del conducto radicular.

Por eso siempre he estado buscando un instrumento, que en esta parte de la endodoncia fuese capaz de retirar rápidamente la mayor parte del material de obturación. Sin duda la nueva lima Endo ReStart dotada de una punta de seguridad «safe activity» es un instrumento extraordinario en este campo, que penetra hasta los materiales de obturación más duros o compactos sin dificultad alguna. Al mismo tiempo se caracteriza por una excelente flexibilidad y es capaz de eliminar viejas obturaciones de conductos con curvatura pronunciada. Por este motivo las limas Endo ReStart forman parte del instrumental que utilizo a diario.»

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:
Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.de



Importador para España y Portugal:

Especialidades Dentales KALMA S.A.
Camino de Hormigueras, 118
28031 Madrid (España)

Tf. (34) 91 380 23 83
kalma@kalma.es
www.kalma.es

