



F6 SkyTaper.
Новый уровень
гибкости.



Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®, Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®, TissueMaster Concept® и Visio-Soft® являются зарегистрированными торговыми марками фирмы Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Некоторые наши инструменты и обозначения, упоминаемые в тексте, являются торговыми марками, имеют патенты либо защищены авторским правом. Отсутствие специальной ссылки на это или знака © не означает, что на данный продукт не распространяется закон о защите авторского права.


Данное издание защищено авторским правом. Все права, в том числе право на перевод, перепечатку и использование (даже отрывков), защищены. Содержимое каталога запрещается публиковать, обрабатывать посредством электронных систем различными методами (например, применяя фотокопирование, микрофильм) без письменного согласия издателя.

Искажение цвета, изменение продукции и опечатки допускаются.

На май 2019

Больше конусность, неограниченный потенциал.

- Препарирование при помощи одного файла с конусностью .06
- Полный ассортимент файлов: 5 размеров для обработки корневых каналов любой анатомической формы
- Гибкость и эффективность благодаря детально продуманному дизайну
- Стерильно упакованные файлы для однократного применения

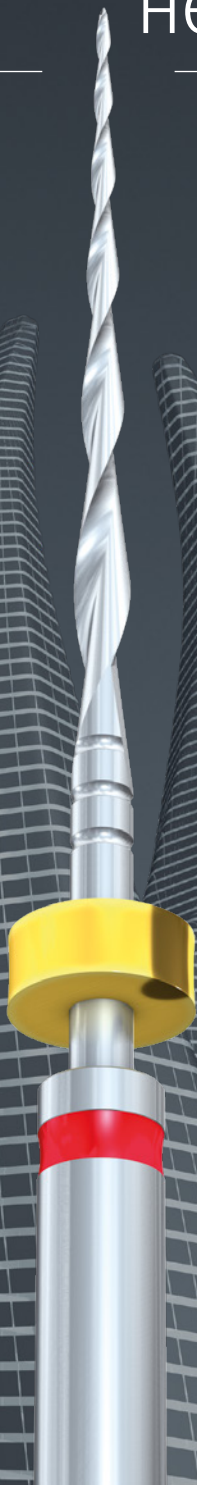

Гибкость без компромиссов.

Гибкая система и её применение

- Полный ассортимент: никель-титановые файлы пяти размеров и трёх длин для препарирования корневых каналов любой анатомии
- Неограниченный выбор метода obturации благодаря конусности .06
- Вращательное применение во всех эндодонтических наконечниках с ограничением усилия либо в эндомоторах.

Эффективный и гибкий дизайн файлов

- Один файл для большинства корневых каналов
- Эффективное поперечное сечение в виде двойной S для тщательного очищения канала
- Непревзойдённая способность сохранять естественную морфологию канала

[01] Эффективное расширение зоны устья канала, например, при помощи устьевого файла OP10L19.

[02] Создание «ковровой дорожки», например, при помощи К - файла размера 015.

В зависимости от того, какой (ручной) файл был использован последним, выбирается соответствующий файл F6 SkyTaper.


Правило: пропустите один размер по ISO.

[03] Препарирование корневых каналов при помощи файла F6 SkyTaper.

015



Поперечное сечение файла

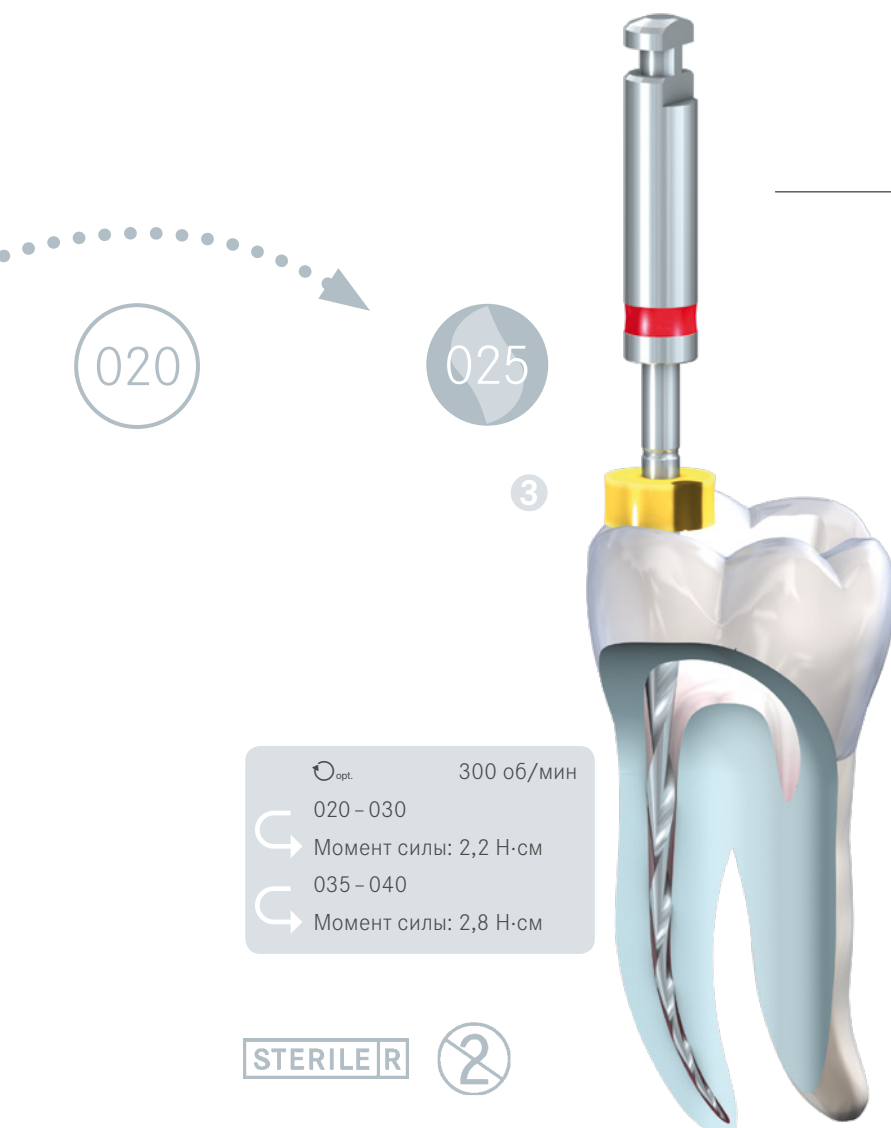

Д-р Гюнтер Штёкль

Эндодонтист, Роттенбург-на-Лабере, Германия

«Система F6 SkyTaper подходит как для врачей общей практики, так и для узких специалистов. Отличная режущая способность инструментов сокращает время препарирования, а значит, я могу больше времени посвятить химической дезинфекции.


Особенно я поражён 6% конусностью, которая прекрасно подготавливает систему каналов для последующей горячей или холодной obturации. Система F6 SkyTaper стала ключевым инструментарием в моей ежедневной практике!»



F6 SkyTaper. Совершенство в каждой детали.



+ Для широких каналов,
если необходимо

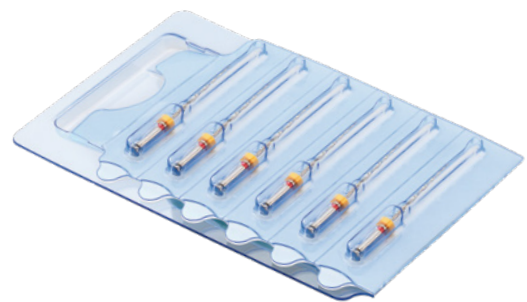

Преимущества стерильно упакованных инструментов, предназначенных для одного пациента:

- Сниженный риск поломки файла в результате циклической усталости
- Исключается риск перекрёстной контаминации
- Нет необходимости в обработке (очистке, дезинфицировании и стерилизации) или в документировании и контроле количества циклов использования



Аксессуары для препарирования:




● **OP10L19.204.030**
Opener



○ **PG03L21/L25/L31.204.015**
PathGlider



● **PG03L21/L25/L31.204.020**
PathGlider

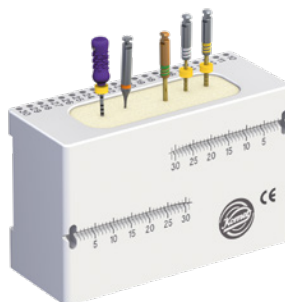

595 Блок для промежуточного хранения файлов

Аксессуары для obturации:



9994 Печь F360 Fill



9996 Obtураторы F360 Fill



9995 Верификатор F360 Fill



PPF06 Бумажные штифты F6 SkyTaper

GPF06 Гуттаперчевые штифты F6 SkyTaper



9978 EasySeal

Силер на основе эпоксидной смолы

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo
Germany

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.de

Комет Россия
Ср. Переяславская, 2-38 · 129110 Москва
Кабирова Юлия
Представитель по продажам и
маркетингу в России

Телефон +7 903 180 6408
Факс +7 495 688 6558
Skype: yulia_kabirova
ykabirova@kometdental.ru
www.kometdental.ru