




Łatwy w użyciu i
bezpieczny **F360**.



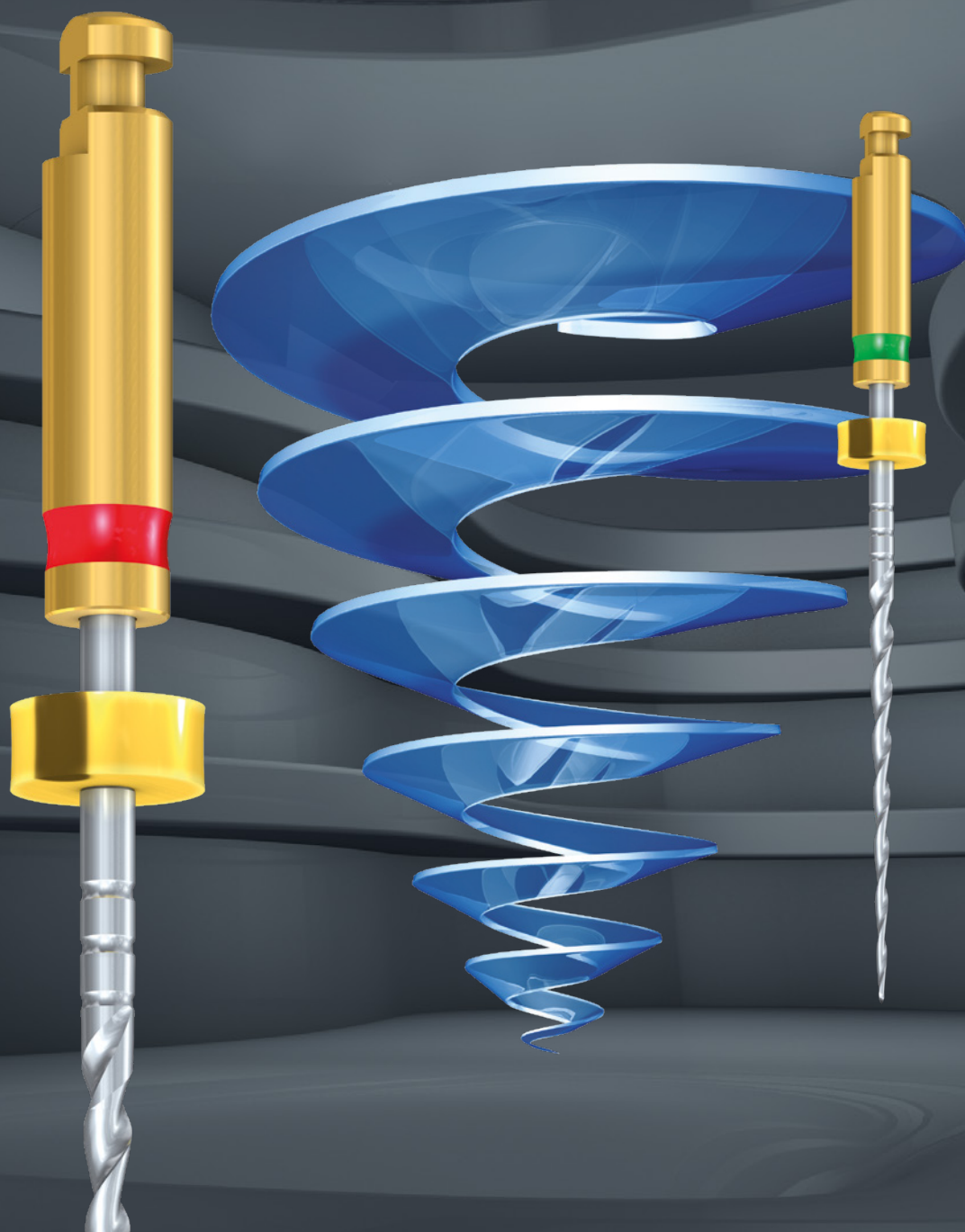

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6-SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® i SHAX® to zastrzeżone znaki towarowe Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym i prawem autorskim. Brak specjalnego oznaczenia lub znaku ® nie oznacza braku ochrony prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym częściowego. Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy żadna część niniejszego materiału nie może być w jakiegokolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub innym sposobem) reprodukowana lub przetwarzana za pomocą systemów elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz wystąpienia błędów drukarskich.

F360. Jak można pokochać endo



Można to poczuć już podczas pierwszego użycia: dzięki F360, sprytnemu systemowi 2-pilnikowemu firmy Komet, poszerzanie kanałów korzeniowych jest jeszcze przyjemniejsze i łatwiejsze, a przy tym bezpieczne. F360 idealnie nadaje się dla początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z preparacją mechaniczną, pozwala na rozwiązanie prawie każdego przypadku endodontycznego. Jeżeli do tej pory nie lubiłeś Endo teraz dzięki F360 pokochasz.

Zapomnij o trudnościach

„Czekałem na to od zawsze. Pacjent wymagający tradycyjnego leczenia endodontycznego, zgłaszający się do mojego gabinetu oznaczał zawsze pogorszenie humoru. F360 daje wszystko to, czego mi potrzeba. Bezpieczeństwo i radość z leczenia endodontycznego.”



dr Maximilian Weiland

lekarz dentysta z Pfaffenhofen

Powód:

- Poszerzanie kanałów przy pomocy instrumentów F360 jest szybsze. Pilniki są ostre i na poszerzenie jednego kanału potrzeba najczęściej tylko 3 minut.
- F360 to bardzo praktyczny instrument – w większości przypadków potrzeba tylko 2 pilników, podczas wymiany pilników nie ma potrzeby przestawiania klucza dynamometrycznego.
- System ten sprawdza się w prawie każdym kanale korzeniowym. F360 to instrument prawie uniwersalny.

Zachwyca także w badaniach!

- Szybkie poszerzanie
- Zachowanie oryginalnego układu kanałów
- Mniejsza ilość przepchniętych wiórów

źródło:

1. *Quantitative evaluation of apically extruded debris with different single-file systems: Reciproc, F360 and OneShape versus Mtwo.*

Autorzy: S. Bürklein, S. Benten, E. Schäfer
Publikacja: International Endodontic Journal 2014; 47, 405–409.


2. *Shaping ability of different NiTi systems in simulated S-shaped canals with and without glide path*

Autorzy: S. Bürklein, T. Poschmann, E. Schäfer
Publikacja: Journal of Endodontics 2014; 40, 1231–1234.

3. *Shaping Ability of 4 Different Single-file Systems in Simulated S-shaped Canals*

Autoren: A. Saleh, P. Gilani, S. Tavanafar, E. Schäfer
Publikacja: Journal of Endodontics 2015; 41, 548–552.



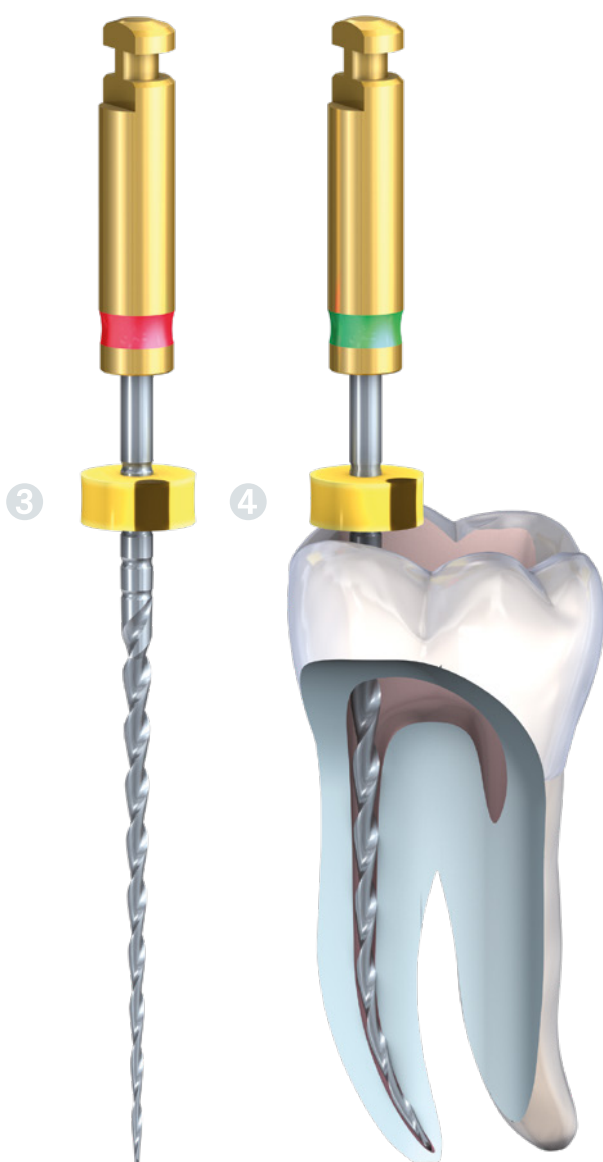


- [01] Znaczne poszerzenie obszaru otworów dostępnych np. otwieraczem OP10L19.
- [02] Preparacja toru wejścia, np. odpowiednimi instrumentami ręcznymi lub PathGlider.
- [03] Poszerzanie kanału na całej długości roboczej poprzez krótkie ruchy wsuwania i wysuwania F360 wielkości 025.
- [04] Poszerzanie kanału instrumentem F360 wielkości 035.



STERILE | R





 $_{opt.} 250 - 350 \text{ min}^{-1}$
 Torque: 1,8 Ncm

Przemysłany każdy szczegół

F360 – informacje szczegółowe

- Poszerzanie tylko 2 pilnikami.
- Nie ma potrzeby przestawiania momentu obrotowego. Wszystkie pilniki pracują z takim samym ustawieniem (1,8 Ncm).
- Możliwość stosowania we wszystkich napędach obrotowych z ograniczonym momentem obrotowym.
- Przy pomocy pilników F60 można opracować każdy kanał korzeniowy, niezależnie czy zakrzywiony, prosty, w kształcie litery S, a wszystko to dzięki niewielkiej stożkowatości pilników (.04).
- Doskonała ostrość dzięki elastyczności stopu NiTi i przekrojowi w kształcie podwójnej litery S
- F360 – instrument uniwersalny: pilniki dla każdego rodzaju kanału. F360 dostępny jest w 3 długościach i dwóch wielkościach podstawowych 025 i 035 oraz 2 dodatkowych (045, 055).

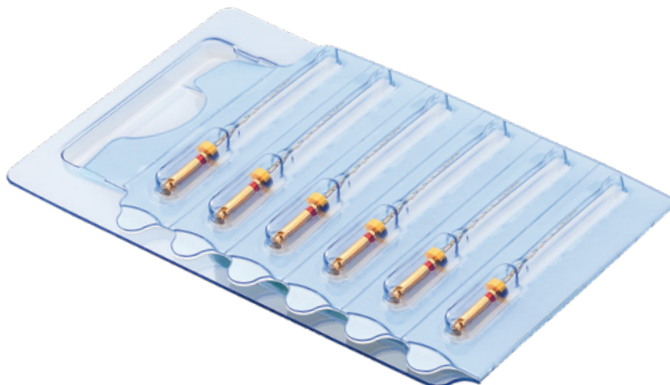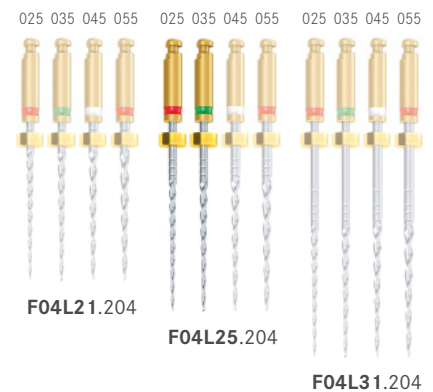

Zalety sterylnej opakowania instrumentów jednorazowych:

- Zmniejszone ryzyko złamania dzięki wyeliminowaniu zmęczenia cyklicznego
- Wyeliminowane ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych
- Brak nakładów pracy związanych z przygotowaniem (czyszczeniem, dezynfekcją i sterylizacją) oraz dokumentowaniem częstotliwości stosowania.

Aksesoria do poszerzania:




● **OP10L19.204.030**
Otwieracz



○ **PG03L21/L25/L31.204.015**
PathGlider



● **PG03L21/L25/L31.204.020**
PathGlider

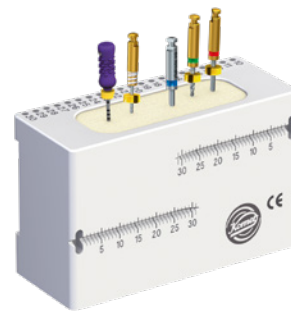

595 Stojak tymczasowy

Aksesoria do obturacji:



PPF04 F360 sączki papierowe

GPF04 F360 świeki gutaperkowe



BCS1 KometBioSeal

Bioceramiczny materiał do wypełnień korzeni



EP0014 EndoPilot z rozszerzeniem DownPack/BackFill

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Sprzedaż Niemcy:

Telefon +49 (0) 800 7701 700

Telefax +49 (0) 800 7701 800

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Eksport:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at