



Zwinny, ostry i skuteczny
Procodile.



ReFlex® and EndoPilot® to zastrzeżone
znaki towarowe Schlumbohm GmbH & Co. KG.


Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,
Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,
OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,
Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®,
TissueMaster Concept® i Visio-Soft® to zastrzeżone
znaki towarowe Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są
częściowo chronione prawem marki, prawem
patentowym i prawem autorskim. Brak specjalnego
oznaczenia lub znaku © nie oznacza braku ochrony
prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do
tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym
częściowego. Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy
żadna część niniejszego materiału nie może być w
jakiegokolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub innym
sposobem) reprodukowana lub przetwarzana za pomocą
systemów elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz
wystąpienia błędów drukarskich.

Stan z sierpień 2019 r.

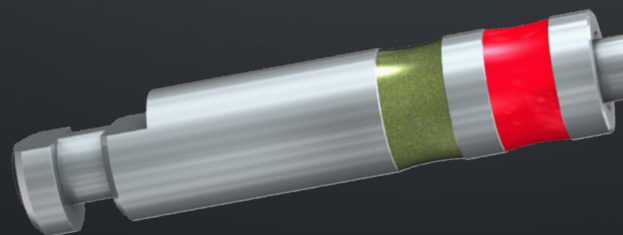


Z natury ostry

■ Optymalne poszerzanie także zakrzywionych kanałów
dzięki różnej zbieżności rdzenia pilnika

■ Szybkie i skuteczne znoszenie tkanki
dzięki większej przestrzeni na wióry

■ Wysokie bezpieczeństwo pacjenta
dzięki zwiększonej odporności na zmęczenie cykliczne

■ Możliwość stosowania we wszystkich napędach recyprokalnych
jak i też z opatentowanymi ruchami ReFlex® w EndoPilot®

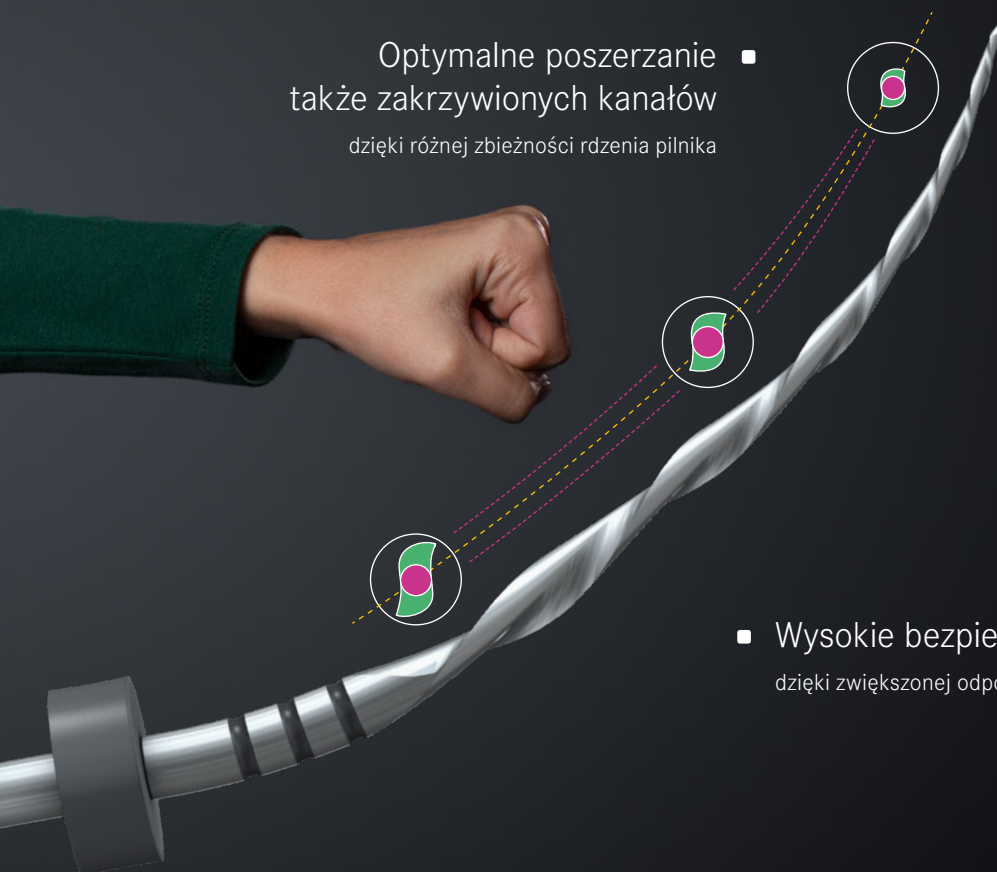

Nowa kompetencja rdzenia

Procodile to zupełnie nowy specjalistyczny instrument do poszerzania recyprokalnego kanałów korzeniowych: o zupełnie nowym kształcie pilnika. Innowacyjny, trzpień pilnika o zmiennej zbieżności nadaje Procodile znacznie więcej skuteczności i elastyczności: maksymalnie łatwe nadawanie kształtu kanałowi i wysokiej jakości poszerzenie. Dzięki swojej zielonej powłoce instrument Procodile już na pierwszy rzut oka różni się od innych pilników.

Ostry:



Szybkie i skuteczne znoszenie.

Dzięki innowacyjnemu rdzeniowi o różnej stożkowatości przestrzeń na wióry pilnika Procodile zwiększona została o 12 %*. Pozwala to na jeszcze bardziej skuteczne usuwanie zainfekowanej tkanki z kanału korzeniowego i optymalizację czasu poszerzania

Elastyczny:

Optymalne poszerzanie także zakrzywionych kanałów korzeniowych.


Inteligentny kształt pilników z rdzeniem o różnej zbieżności i przekrojem w kształcie podwójnej litery S zwiększa elastyczność instrumentu o 44%. Pozwala to na odpowiednie poszerzanie nawet zakrzywionych kanałów korzeniowych..

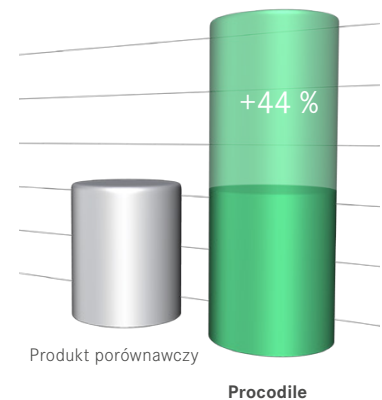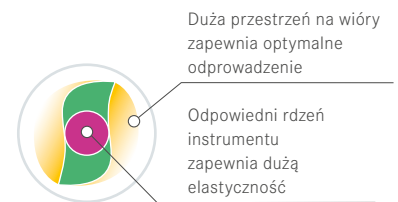

Lepsza elastyczność

Procodile w porównaniu do R6 ReziFlow, na podstawie wewnętrznych badań. Wyniki potwierdzone odpowiednimi danymi.

*) W porównaniu do instrumentów R6 ReziFlow

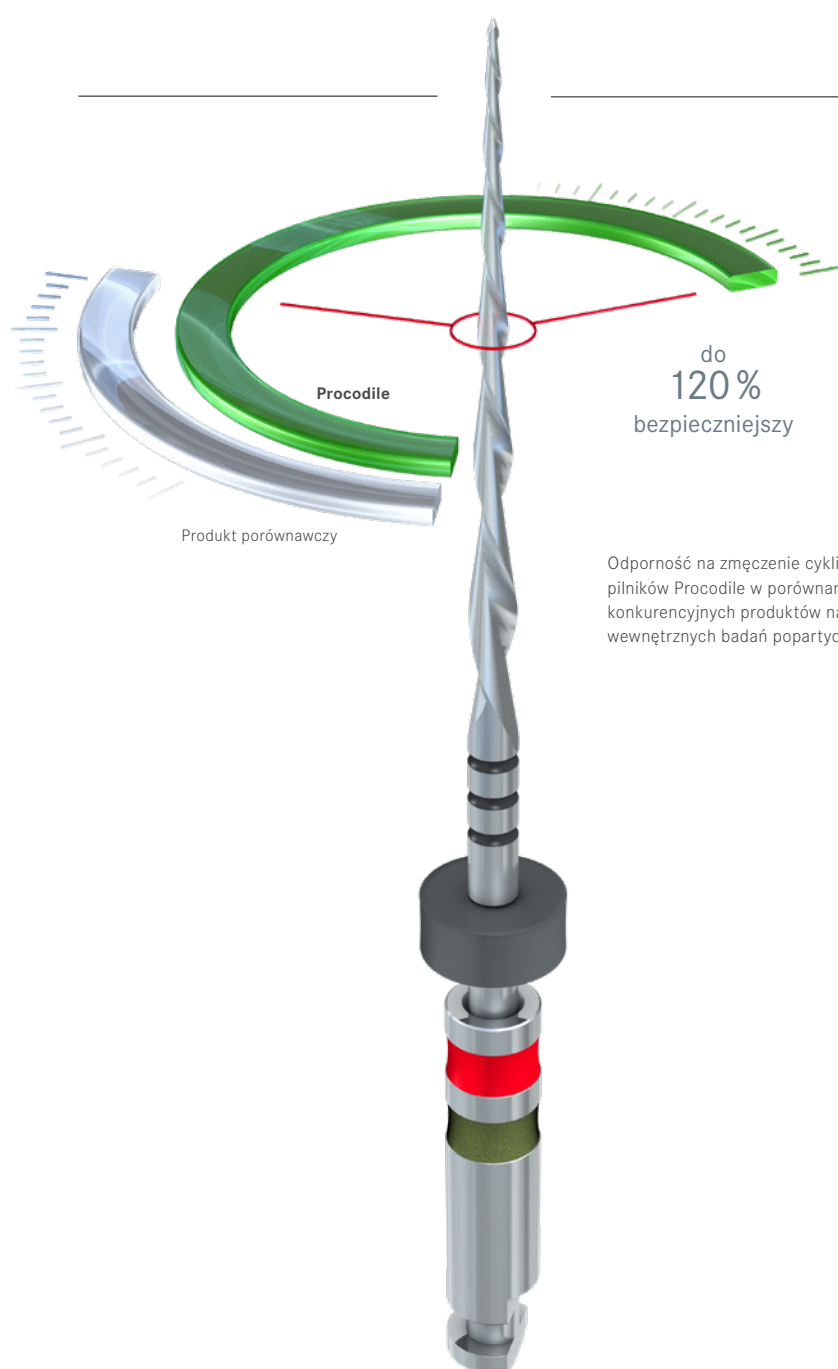

**Wytrzymały:
Większe bezpieczeństwo dla
pacjentów.**
















W porównaniu do innych recyprokalnych systemów pilników Procodile charakteryzuje się do 120% większą odpornością na zmęczenie cykliczne. Zmniejsza to ryzyko złamania instrumentu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Sterylnie zapakowane instrumenty jednorazowe zmniejszają także ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia krzyżowego.

**Inteligentny:
Nowy rodzaj ruchu w urządzeniu
EndoPilot.**

Pilniki Procodile przeznaczone są do pracy we wszystkich dostępnych napędach recyprokalnych, zapewniają bezpieczną i nieskomplikowaną obsługę. Jeszcze lepiej pilniki Procodile sprawdzają się wykorzystując ReFlex, nowy opatentowany ruch w urządzeniu EndoPilot: łączy on w sobie zalety ruchu obrotowego i recyprokalnego, co ułatwia pracę w prostych i zakrzywionych kanałach.


Step by Step.


Aby praca nie była skomplikowana opracowano cztery główne wielkości pilników Procodile przeznaczone do wąskich, średnich i dużych kanałów. Dzięki dopasowanym sączkom i ćwiekom udało się zoptymalizować obturację.


	Opcja dla wąskich kanałów				
	● ● PROC06L25.204.020		● PPPR06.000.020		● GPPR06.000.020
	● ● PROC06L25.204.025		● PPPR06.000.025		● GPPR06.000.025
	Opcja dla średnich kanałów				
	● ● PROC05L25.204.040		● PPPR05.000.040		● GPPR05.000.040
	Opcja dla dużych kanałów				
	● ● PROC04L25.204.050		● PPPR04.000.050		● GPPR04.000.050






 [01] Znaczące poszerzenie obszaru ujścia kanałów korzeniowych np. recyprokalnym otwieraczem OPR08L19.

 [02] Preparacja toru wejścia np. pilnikiem K wielkości 015. Wybór odpowiedniego pilnika Procodile w zależności od wielkości użytego pilnika (ręcznego). Zasada: pominąć jedną wielkość ISO.

 [03] Poszerzenie kanału pilnikiem Procodile.

 [04] Obturacja odpowiednim świeciem gutaperkowym.

STERILE | R

2



Procodile. System.

Procodile pilniki o zbieżności .06



●● **PROC06L25.204.020**



●● **PROC06L25.204.025**



●● **PROC06L25.204.030**

Procodile pilniki o zbieżność .05



●● **PROC05L25.204.035**



●● **PROC05L25.204.040**

Procodile pilniki o zbieżności .04



○● **PROC04L25.204.045**



●● **PROC04L25.204.050**

Dostępne w długościach 21 mm, 25 mm i 31 mm.
[6 pilników w blistrze]



Procodile sączi papierowe

PPPR06.000.S1

zawartość: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

● **PPPR06.000.020**

● **PPPR06.000.025**

● **PPPR06.000.030**

● **PPPR05.000.035**

● **PPPR05.000.040**

○ **PPPR04.000.045**

● **PPPR04.000.050**

Procodile ćwieki gutaperkowe

GPPR06.000.S1

zawartość: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

● **GPPR06.000.020**

● **GPPR06.000.025**

● **GPPR06.000.030**

● **GPPR05.000.035**

● **GPPR05.000.040**

○ **GPPR04.000.045**

● **GPPR04.000.050**



PPSPR06 Procodile sączi papierowe

Zapakowane sterylnie w blistrach

zawartość: 120x 025, 20x 030, 20x 035, 40x 040

Procodile. Akcesoria.



●● OPR10L19.204.030
otwieracz recyprokalny



●● OPR08L19.204.025
otwieracz recyprokalny



9978 EasySeal
materiał wypełniwiowy na bazie żywicy epoksydowej

EndoPilot – teraz z inteligentnym ruchem ReFlex®.

Pilniki Procodile przeznaczone są do pracy we wszystkich dostępnych napędach recyprokalnych, zapewniają bezpieczną i nieskomplikowaną obsługę. Jeszcze lepiej pilniki Procodile sprawdzają się wykorzystując ReFlex, nowy opatentowany ruch w urządzeniu EndoPilot: łączy on w sobie zalety ruchu obrotowego i recyprokalnego, co ułatwia pracę w prostych i zakrzywionych kanałach.



EP014 EndoPilot
dostępny na życzenie

Zwinny, nowoczesny i zachwycający: pierwsze wrażenia.

“System Procodile firmy Komet mogę polecić każdemu koledze. Prosty w obsłudze system recyprokalny, który sprawia, że leczenie endodontyczne staje się nieskomplikowane i bezpieczne. Szczególnie skutecznym jest on w znoszeniu tkanki na całej długości kanału, na uwagę zasługuje także jego elastyczność. System ten jest moim zdaniem uniwersalny, a jakość poszerzenia doskonała.”



dr Björn Schaper

Lekarz dentyista z Detmold,
Lippe/NRW
Germany

“Moim życzeniem było posiadanie takiego pilnika, który pracowałby bardzo skutecznie także w zakrzywionych i wąskich kanałach korzeniowych. Już podczas pierwszego leczenia endodontycznego zacząłem doceniać pracę z użyciem pilników Procodile. Niezbyt agresywne, łatwość kontrolowania i bardzo dobrej jakości ostrza.”



Niels Niemann


Lekarz dentyista z Monachium
Germany

Procodile.

Zestaw wprowadzający.

4689A Procodile zestaw wprowadzający

Procodile pilniki

- 6x   **PROC06L25.204.025**
- 6x   **PROC06L25.204.030**
- 6x   **PROC05L25.204.035**
- 6x   **PROC05L25.204.040**

Procodile sączi papierowe

- 1x **PPR06.000.S1**
zawartość: 30x 025, 10x 030,
10x 035, 10x 040

Procodile ówieki gutaperkowe

- 1x **GPPR06.000.S1**
zawartość: 30x 025, 10x 030,
10x 035, 10x 040



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Sprzedaż Niemcy:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Eksport:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de