


# SonicLine

Scaler/Paro | SF1-8



== max. 2 mm

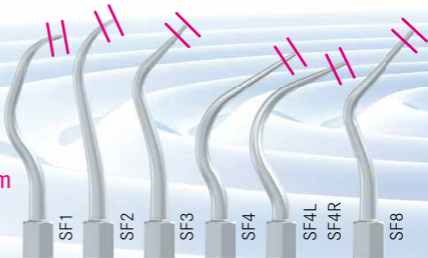

## Indicazione

## Livello di potenza SF1LM/S

	1	2	3	
Scaler	1	2	3	
Profilassi implantare	1	2	●	
Paro	1	2	3	
Prep. delle corone, Stripping/Shaping	1	●	●	
Prep. delle cavità, Inlay	1	●	3	
Tecnica delle faccette, Micro/Bevel	1	●	●	
Lavorazione delle fessure	1	2	3	
Endo*	1	2	●	
Chirurgia**	1	2	●	

Attenzione: \*SF65, \*\*SFS103 - 105 solo al livello 1.

\*\*SFS100/101/102/109 consentito anche al livello 3.

- consentito
- solo per brevi intervalli
- non è consentito