


# Set | TD2059

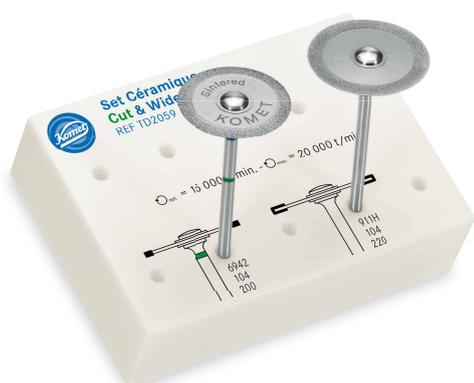

Set « Cut & Widen » pour le façonnage des embrasures céramique.

2 gestes = 2 disques pour une maîtrise parfaite.

Lors du façonnage de vos embrasures en céramique, deux gestes distincts sont nécessaires :

- Approfondissement (CUT)
- Elargissement (WIDEN)

Ces deux disques sont conçus spécialement pour travailler de la meilleure façon :

**6942.104.200** (bague verte)

Diamanté dans la masse pour une action tranchante (épaisseur : 0,17 mm)

Vitesse optimale :  $v_{opt}$  15.000 t/min.

Faible pression

**911H.104.220**

Diamanté en surface et souple pour ouvrir l'embrasure avec efficacité.

(épaisseur : 0,15 mm)

Vitesse optimale :  $v_{opt}$  15.000 t/min.

Faible Pression



6942.104.200



911H.104.220