


Komet Info

01-17

Informations pour le laboratoire.

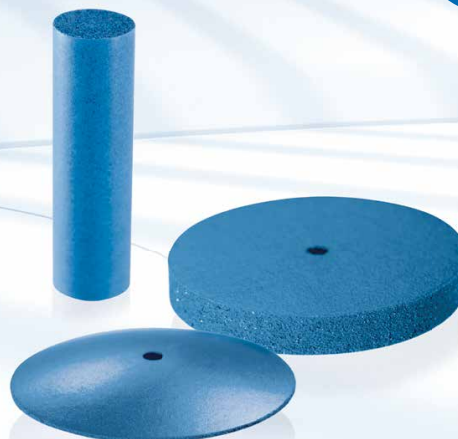

Poliswift

Soucieux de la santé des utilisateurs, Komet a développé des polissoirs pour alliages non précieux à très faible dégagement de poussières.

L'élasticité du liant et la concentration des particules abrasives permettent à ces polissoirs d'être utilisables sur tous les métaux y compris le titane.


L'étape du brillantage des pièces est grandement facilitée.

Avantages :

- Faible dégagement de poussières.
- Polissoirs particulièrement économiques.



9453.900.060

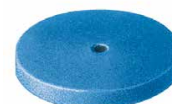

9454.900.220



9460.900.220

Vitesse conseillée : \varnothing_{opt} 6.000 t/min.


Vitesse maximale : \varnothing_{max} 15.000 t/min.



Polissoirs diamantés pour céramique

Un choix inégalé de polissoirs diamantés pour faciliter le travail de la céramique. Tous les gestes quotidiens deviennent plus aisés :

- Le façonnage des bords libres, le polissage des bandeaux, les caractérisations de surface ou l'ajustage des limites cervicales.
- Un large choix de formes d'instruments.
- Efficacité du diamant.
- Souplesse du liant (matrice) sécurisant le geste.

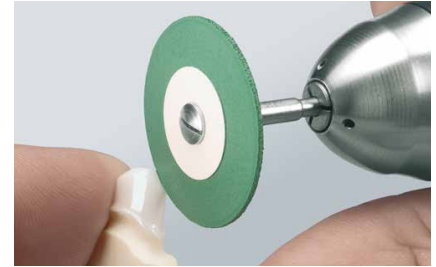

94003SC.104.260

94018C.104.055

9697.900.180

(mandrin : 310.104)

Coffret 4399A

Komet propose un coffret rassemblant les polissoirs pour céramique en deux formes pour toutes les faces des dents prothétiques.

