

Brossette siliconée 9486

Brossette en fibres et silicone compressés.

Destinée aux réglages et polissage de la résine :

- Gouttières thermoformées.
- Bords de prothèses adjointes et appareils d'orthodontie.
- Polissage de palais profonds de prothèse adjointe.

La consistance de cette brosette permet de travailler sur une zone précise et de faciliter l'abrasion contrôlée de la partie souhaitée de l'appareil.

La fabrication compacte de cette brosette lui confère une bonne tenue dans le temps et lui permet de garder sa forme de disque épais.



9486.900.260
non monté

Livrée non montée, nous conseillons d'utiliser le mandrin 305.104.080.

Vitesse optimale : \odot_{opt} 6.000 t/min.

Coffret Flower Disc TD3069


Quatre disques au design innovant réunis dans un coffret pour une utilisation polyvalente à un tarif remarquable.

Les Flower Discs sont livrés dans un coffret esthétique : quatre disques dont deux en diamètre 220 et deux en diamètre 180.


Avantages :

- Design inédit
- Utilisable sur résine ou sur céramique
- Efficacité grâce à une granulométrie forte (bague verte)
- Diamantation large et sur les deux faces
- Epaisseur 0,30 mm
- Deux diamètres : 180 et 220

Vitesse optimale : \varnothing_{opt} 15.000 t/min.

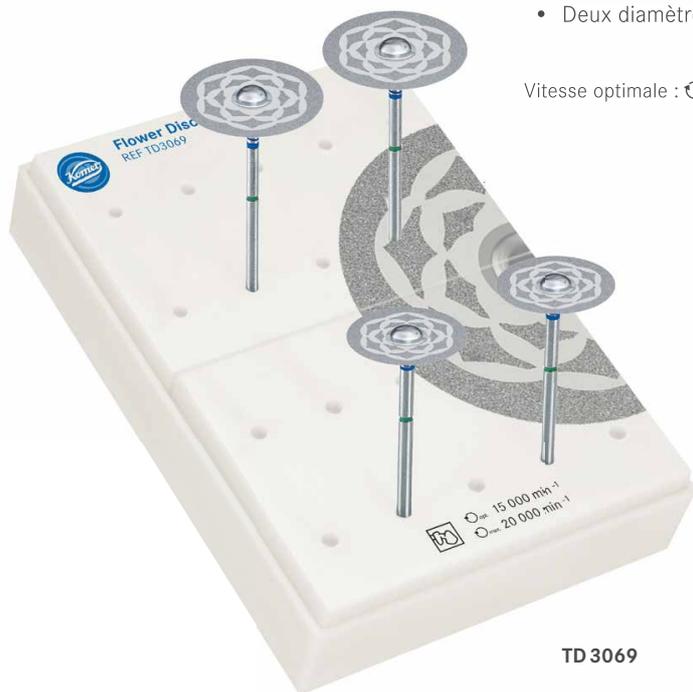

TD 3069

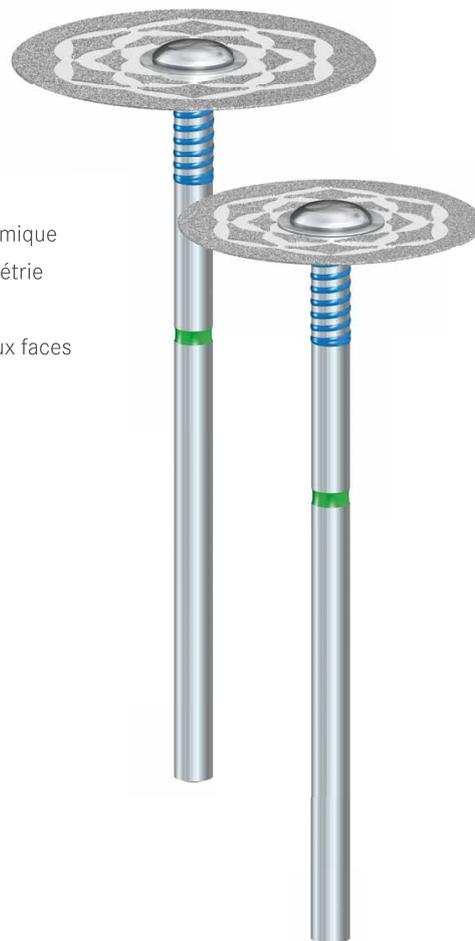

CéraClip vert 9694

Les multiples utilisations du polissoir diamanté Céraclip ont conduit Komet à créer une version à granulométrie forte.

De couleur verte, il vient compléter la gamme avec un pouvoir d'abrasion élevé.

La diamantation dans la masse rend cet instrument économique puisqu'utilisable jusqu'au mandrin. L'alliance de la matrice souple et du diamant permet de s'adapter aux contours de la dent mais aussi de faire des retraits (cut back) ou toutes modifications de la forme de la céramique.

Pour une parfaite utilisation nous recommandons de coller ce polissoir sur son mandrin (réf 310.104).

Vitesse optimale : \varnothing_{opt} 6.000 t/min.



9694.900.180
non monté

